

Phonak ComPilot

Technische Daten

Phonak ComPilot bietet dreifachen Komfort: drahtlose Anbindung, individuell programmierbare Fernsteuerung und gesprochene Meldungen (VoiceAlerts). Alle diese Funktionen sind in einem einfachen und attraktiven Gerät untergebracht. Mit ComPilot können drahtlose Hörsysteme von Phonak mit Mobiltelefonen, Fernsehern, MP3-Playern, FM-Empfängern und weiteren Geräten verbunden werden.



Beschreibung

Tasten

- 1 Haupttaste (M)
- 2 Lautstärke-Tasten (+/-)
- 3 Home-Taste (↔)
- 4 Verbinden-Taste (◀▶)
- 5 EIN/AUS-Schalter (I/O)

Eingänge



- 6 Mikrofonöffnungen
- 7 Audio-Eingang (3,5-mm-Buchse)
- 8 FM-Eingang (Euro-Stecker)
- 9 Ladebuchse (Mini-USB)

Anzeigen

- 10 Audioanzeige
- 11 Stromanzeige

Diverses

- 12 Induktionsschlaufenanschlüsse
- 13 Induktionsschleife (mit Antenne)
- 14 Induktionsschlaufenstecker

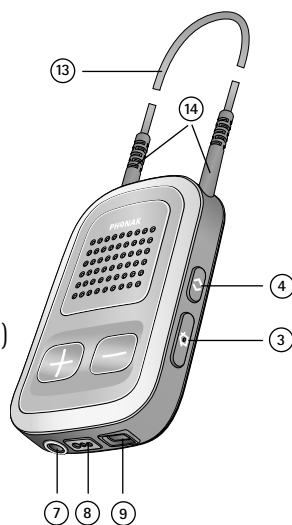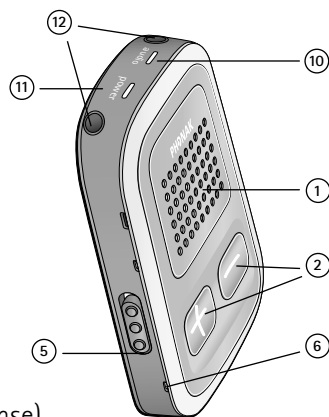

Zubehör

- Audiokabel, 1,5 m
- Universal-Netzgerät, Mini-USB
- Induktionsschleife standard (73 cm)
- Induktionsschleife kurz (50 cm)
- Externes Ansteckmikrofon "MC1"
- Phonak TVLink S Basisstation
- 12V Autoadapter, Mini-USB

(Unterschiedliche Verfügbarkeit in den einzelnen Ländern)

Allgemein

Masse:	L x W x H: 7,2 x 4,9 x 1,4 cm
Gewicht:	46 g
Farbe:	Palladium Schwarz
Betriebsbedingungen:	0 °C bis +45 °C / < 95% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerungs- und Transportbedingungen:	-20 °C bis +60 °C / < 90% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)



Spannungsversorgung

Batterie:	Lithium-Polymer, 3,7 VDC
Ladezeit:	1 Stunde Die Ladezeit hängt vom anfänglichen Batteriestatus ab. Volle Leistung wird nach dreimaligem, vollständigen Lade- und Entladezyklus erreicht.
Kapazität:	450 mAh (typ.)
Betriebszeit:	8 Stunden Bluetooth-Übertragung 48 Stunden im eingeschalteten Zustand, Bluetooth bereit 10 Stunden Audio-Übertragung über Kabel 9 Stunden Übertragung über FM-System 2 Monate Fernsteuerung
Lade-Eingang:	Typ: Gleichstrom, stabilisiert 5 V +/- 5% Max. current: 500 mA Die Batterie kann nicht überladen werden. Während des Ladevorgangs kann das Gerät warm werden. Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen, nur das Original Phonak-Netzgerät zu verwenden.

Audio-Daten

Unterstützte Audioeingänge:	<ul style="list-style-type: none">• via Kabel (3,5 mm Buchse)• Bluetooth Audio (Stereo)• Bluetooth Telefon• FM (Euro-Stecker)
Audioqualität:	Stereo / 22 kHz Sampling-frequenz
Audiobandbreite:	20 Hz – 10 kHz

Bluetooth

Unterstützte Bluetooth-Profile:	<ul style="list-style-type: none">• Headset Profile (HSP)• Handsfree Profile (HFP)• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)• Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)• Phone Book Access Profile (PBAP)
Bluetooth Bereich:	10 m (Klasse 2)
Bluetooth Kompatibilität:	Bluetooth version 2.1
QDID:	B018562
Max. Anzahl gekoppelter Geräte:	8
Maximale Anzahl simultan aktiver Profile:	<ul style="list-style-type: none">• 2 A2DP• 2 HSP/HFP (in der Regel 2 Mobiltelefone oder 1 Mobiltelefon und 1 TVLink S Basisstation)


Funkdaten

	Induktionsschlaufen-antenne	Ferrite-Antenne
Typ:	Abnehmbar, induktiv	Integriert, induktiv
Betriebsfrequenz:	10.6 MHz	10.6 MHz
Belegte Bandbreite (99% Bandbreite):	588 kHz	570 kHz
Modulation:	FSK	FSK
Kanal:	Einkanalfunk	Einkanalfunk
Magnetfeldstärke bei 10 m:	< -34 dBµA/m	< -11.5 dBµA/m
Betriebsbereich zu Hörgerät:	20 cm	80 cm
Trageoption:	Am Hals	In der Hand
Anwendungsfall:	Audio-Übertragung und Fernsteuerung	Nur Fernsteuerung

Angewandte Standards:

Europa	
Funk:	ETSI EN 300 330 (HiBAN) ETSI EN 300 328 (Bluetooth)
EMV:	EN/IEC 60601-1-2
Elektrische Sicherheit:	EN/IEC 60601-1
USA	47 CFR Part 15.209 (HiBAN) 47 CFR Part 15.247 (Bluetooth)
Kanada	RSS-210 (Issue 8) Annex 1 (HiBAN) RSS-210 (Issue 8) Annex 8 (Bluetooth)
Japan	EWPE (HiBAN), ARIB-T66 (Bluetooth)

Kompatibilität Phonak Hörgeräten

Streaming und Fernsteuerung*	Wirelessfunktionalität erforderlich** (bei CORE Hörgeräten nur Streaming möglich)
 Bluetooth	Der Begriff Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken durch Phonak erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.

* Hinweis: Die Fernsteuerungsoption muss durch den Hörakustiker aktiviert werden.

** Auf unserer Phonak Webseite www.phonakpro.com finden Sie unter [Support] → [Kompatibilität] → Zubehör eine komplette Liste der kompatiblen Hörgeräte